

SmartCase SC1230 / SC1240




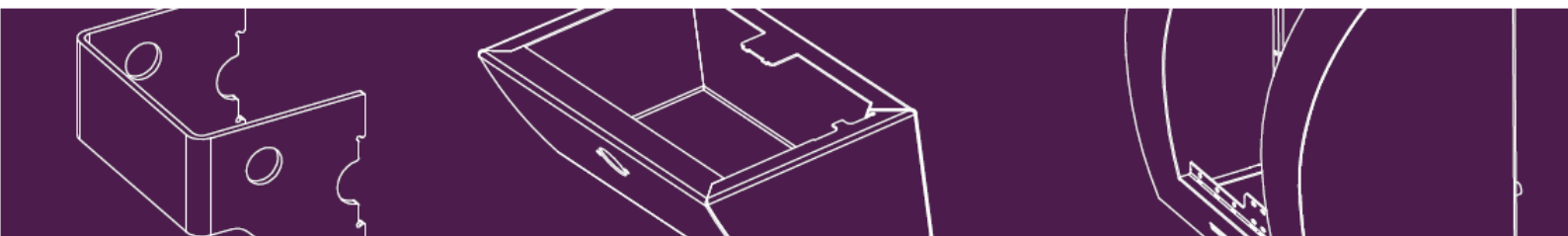


Table of Contents

WAT IS EEN SMARTCASE?	3
VOOR UW VEILIGHEID	3
CONVENTIES	3
GARANTIE	4
PRODUKT OVERZICHT	5
INSTALLATIE	6
BELANGRIJK	6
OPHANGING OP STEEN OF BETON	6
STROOMVOORZIENING EN STROOMKABEL	6
WAARSCHUWING	7
OPHANGING OP HOUT	7
GEBRUIK	7
BELANGRIJK:	7
ONDERHOUD EN TROUBLESHOOTING	8
ONDERHOUD	8
TEMPERATUUR	8
CODE AANPASSEN (SC1240)	9
TROUBLESHOOTING	10
BEGRIPPENLIJST	11
APPENDIX A: TECHNISCHE SPECIFICATIE	12

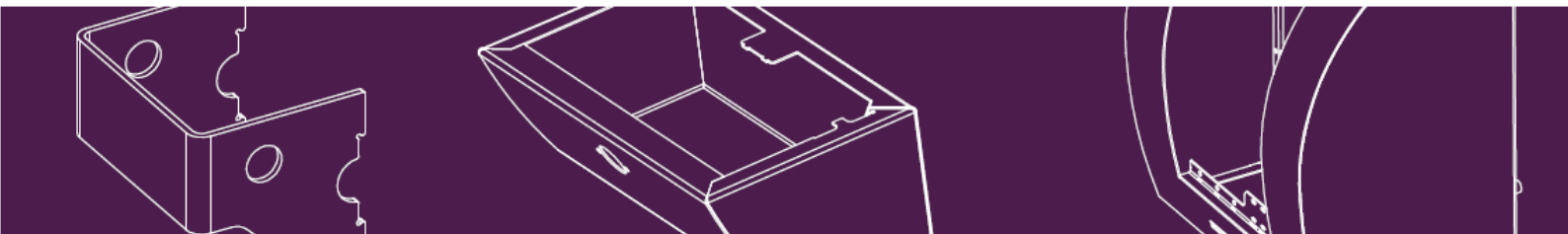

Wat is een SmartCase?

De AED (Automatic External Defibrillator) is een belangrijk medisch apparaat voor hulp in het geval van hartfalen. Het is van groot belang dat de AED beschermd is, beveiligd is en 24/7 beschikbaar is voor onmiddellijke ondersteuning in een noodgeval. Uw SmartCase kast voorziet in een optimale bescherming en verzekerd dat de AED dag en nacht beschikbaar is.


De SmartCase buitenkast is ontworpen om de AED te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. De kast is bestand tegen water en stof, vandalisme en combineert een bewezen concept met maximale prestaties. De roestvast stalen kast gecombineerd met een polycarbonaat venster geeft de ultieme bescherming tegen corrosie en impacts en zorgt voor een duidelijk zicht op de AED. Om een temperatuur boven de 0°C te garanderen, is SmartCase buitenkast uitgerust met een temperatuursensor en een elektrisch verwarmingselement. De kast is volledig geïsoleerd om energie te besparen tijdens het verwarmen. Verder is de AED beschermd tegen oververhitting door middel van actieve ventilatie.

Voor uw veiligheid

Conventies Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig. Installateurs en operators moeten de veiligheidsvoorschriften doornemen voordat de SmartCase AED kast in gebruik genomen wordt. Het niet opvolgen van de instructies in dit document kan gevaarlijk of illegaal zijn. Volg alle aanbevolen onderhoudsinstructies op. Als er zich een probleem voordoet, neem dan contact op met uw dealer.


		Symbol
Waarschuwing:	Het waarschuwingssymbool maakt u attent op situaties of acties die gevaar op kunnen leveren	 WAARSCHUWING

GT MEDICARE behoudt zich het recht voor om dit document en alle gerelateerde producten uit deze handleiding aan te passen of te verbeteren, zonder in kennisstelling vooraf. De inhoud van dit document wordt beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie.

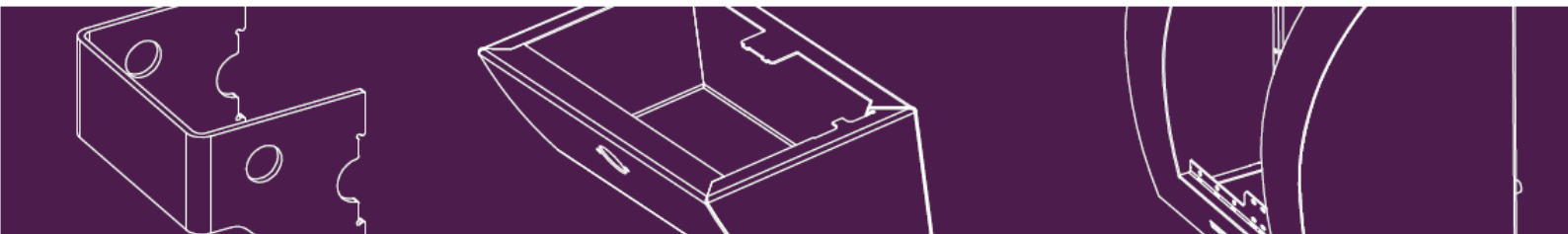

Garantie

1. GT MEDICARE staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde produkten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
3. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling:
 - A: Indien de koper de produkten heeft verwaarloosd.
 - B: Indien de koper wijzigingen aan de produkten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens GT MEDICARE zijn verricht.
 - C: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende producten of onheilen.
 - D: Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruikersaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
 - E: Indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
 - F: Indien de koper de produkten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
4. GT MEDICARE garandeert dat de Produkten geen ernstige gebreken bevatten op het moment van levering.
5. Wederverkoper zal claims ter zake van gebreken, schade of non-conformiteit van de Produkten die bij inspectie van de Produkten redelijkerwijs kan worden vastgesteld, schriftelijk aan GT MEDICARE rapporteren binnen 10 werkdagen na ontvangst van de Produkten op het terrein van Wederverkoper. Wederverkoper zal alle andere claims schriftelijk kenbaar maken aan GT MEDICARE binnen 1 jaar na de datum van levering. De wederverkoper zal Produkten waarvan Wederverkoper stelt dat zij non-conform of beschadigd zijn, op verzoek en op kosten van GT MEDICARE onverwijld terugzenden aan GT MEDICARE ten behoeve van inspectie door GT MEDICARE. GT MEDICARE zal claims die niet conform de in dit lid genoemde vereisten en binnen de in dit lid bedoelde termijnen worden gedaan, niet accepteren. GT MEDICARE zal, in geval hij verantwoordelijk is voor de non-conformiteit of schade aan het Produkt, naar eigen keuze de Produkten repareren, vervangen door nieuwe Produkten dan wel Wederverkoper de koopprijs voor de Produkten retourneren. GT MEDICARE zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben jegens Wederverkoper met betrekking tot non-conforme of beschadigde Produkten dan in de vorige zin weergegeven.
6. De duur van de garantie op de GT MEDICARE apparaten bedraagt 24 maanden op alle mechanische onderdelen en elektronica van de wandkasten, waarbij krassen en beschadigingen buiten deze bepaling vallen. De garantieduur gaat in vanaf het moment van levering. De Producent is slechts gehouden tot nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze garantiebepalingen. De Producent is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van producent beperkt tot de verkoopprijs van de verkochte produkten.
7. Wanneer een schadegeval terug te voeren is naar een wijziging of een ondeugdelijk gebruik van het in het contract omschreven product is de garantieregeling onder alle omstandigheden niet van kracht.

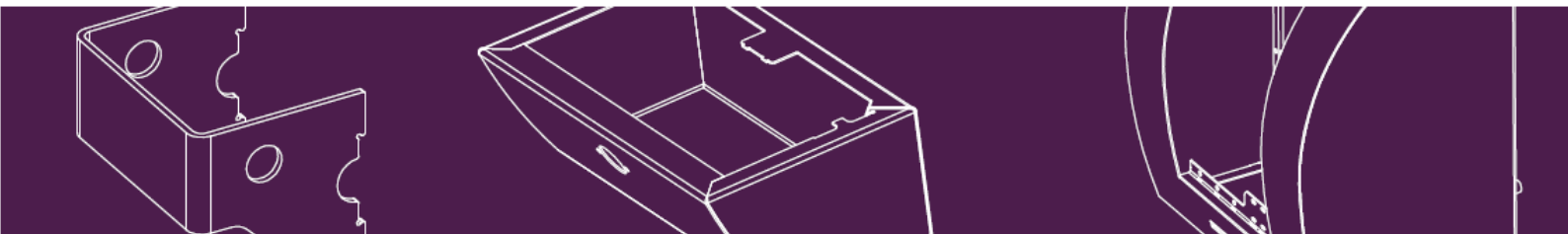

8. Elke zending van goederen zal na ontvangst direct worden onderzocht door de ontvanger. De klant dient GT MEDICARE binnen tien (10) dagen na ontvangst schriftelijk te informeren over alle gebreken bij de zending. Indien deze gebreken binnen een periode van tien (10) dagen niet schriftelijk gemeld zijn, dan geldt tussen partijen dat de zending compleet was. Voor verborgen gebreken, dit te bewijzen door de klant, geldt dat claims alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn. Indien een claim door GT MEDICARE gegrond wordt bevonden, dan is GT MEDICARE uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren, zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het indienen van een claim ontslaat de klant nooit van zijn betalingsverplichtingen.

Produkt Overzicht

Dank voor het aanschaffen van deze SmartCase.

De SmartCase bevat de volgende onderdelen:

SmartCase SC1230 en SC 1240

- SmartCase AED Kast (geisoleerd)
- 24V Adapter
- Stroomkabel 3m (voor geïnstalleerd)
- Quick installation guide
- Elektrisch verwarmingselement & AED houder
- Fan voor actieve ventilatie
- LED verlichting (rood en blauw)
- Alarm, >95dB
- Installatie materiaal

Installatie materiaal:



Washers (4x)

M8 moeren (4x)

Nylon afstandhouders (4x)

Muurpluggen (4x)


Stoekende (4x)

SmartCase SC1240

- Sleutel

The SC 1240 is uitgerust met een mechanisch code slot. Voor dit type is een extra back-up sleutel bijgesloten



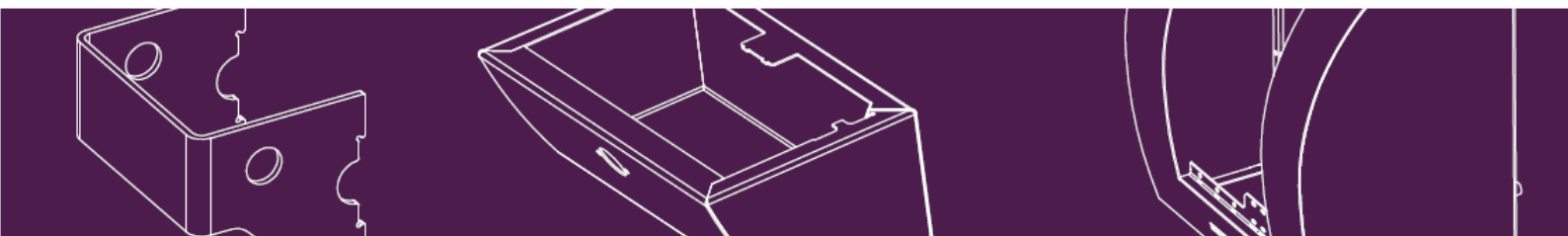

Installatie

Belangrijk Het bijgevoegde installatiemateriaal is uitsluitend bedoeld voor ophanging op een gelijkmatig oppervlak van hout, (bak)steen of beton. Panelen moeten een minimum dikte van 3mm hebben. Gebruik altijd de meegeleverde afstandhouders. Wij raden aan om de kast op te hangen in de schaduw om hoge temperaturen in de kast te voorkomen.

Ophanging op steen of beton Boor 4 gaten met een onderlinge afstand van 240 mm. Boor de 10 mm gaten tot een minimum diepte van 60 mm om voldoende diepte voor de pluggen te garanderen. Wij raden aan om de bovenste gaten te boren op een hoogte tussen de 1.5m en 1.6m boven de grond. De gaten moeten altijd in het midden van de (bak)steen geboord worden. Draai de M8 stokeindes in de pluggen totdat ze 20mm uitsteken van de wand en schuif de nylon afstandhouders over de stokeindes. Plaats nu eerst de stroomkabel voordat u de kast aan de muur hangt.




1: Plaats de pluggen en stokeindes




2: Plaats de afstandhouders

Stroomvoorziening en stroomkabel GT MEDICARE adviseert om een 12 mm gat te boren, waar doorheen de stroomkabel door de muur geleid kan worden. Deze kan dan bevestigd worden aan de 24V adapter, welke binnen in het huis of gebouw geplaatst moet worden. Het is belangrijk eerst de stroomkabel door de muur te leiden voordat de kast aan de muur wordt opgehangen. De stroomkabel is al bevestigd aan de binnenkant van de SmartCase (voorgeïnstalleerd). Leidt de kabel van buiten naar binnen en trek deze dan van binnenuit verder naar binnen. The SmartCase is nu gereed om aan de muur opgehangen te worden. Na plaatsing op de stokeindes kunt u de ringen en moeren plaatsen om de kast vast te maken (aan de binnenzijde van de kast).

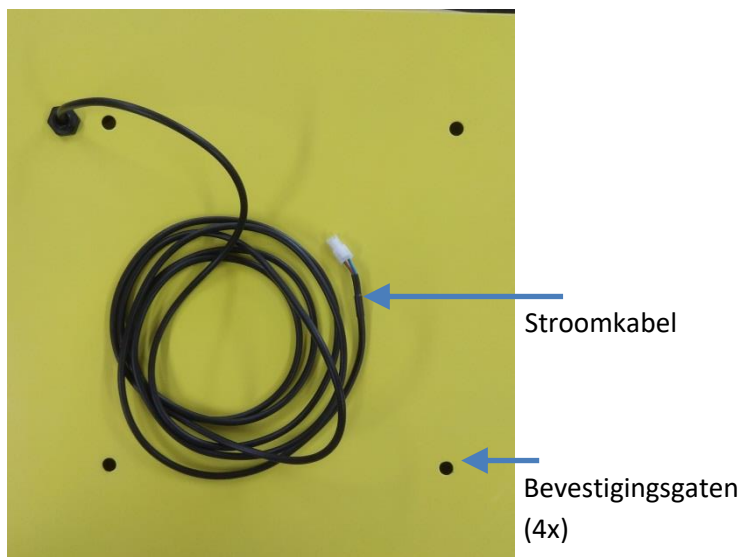

Laatste stap: plaatsing van ringen en M8 moeren aan de binnenzijde



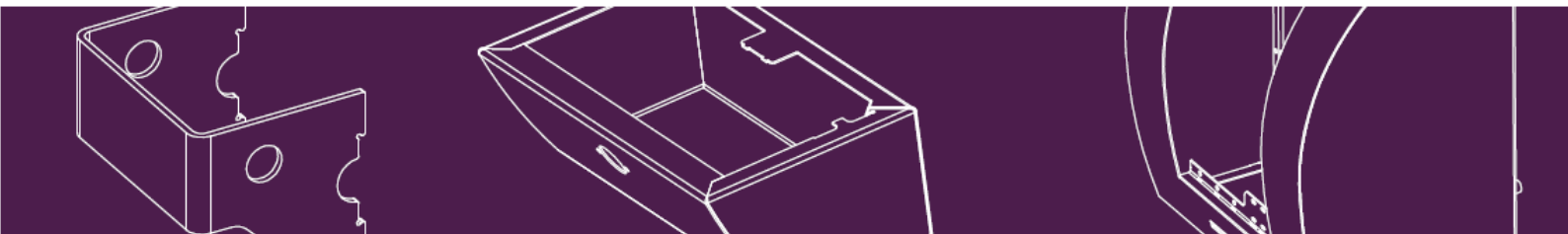

Waarschuwing als de muur zwak is, raden we aan om Fischer VS 100P te gebruiken. Nadat de vloeistof in de gaten is gespoten, dient u slechts de stokeindes te plaatsen –gebruik de pluggen in dit geval niet opnieuw. Lees de instructies op het Fischer label zorgvuldig en zorg ervoor dat de gaten volledig schoon zijn na het boren.

Ophanging op hout Boor kleine gaten van ongeveer 4 mm diameter in het hout en draai de schroefdraad stevig in het hout en bevestig de SmartCase zoals hierboven beschreven. Wij adviseren om de bovenste gaten te boren op een hoogte tussen de 1.5m en 1.6m boven de grond.

Gebruik

SC1230 (zonder slot): Om de kast te sluiten, sluit de deur en draai de knop linksom (90 graden). Om de kast te openen, draai de knop in de tegenovergestelde richting (90 graden rechtsom) en trek de deur naar u toe.


SC1240 (code slot): Voer de geprogrammeerde code in (default code = 333) door middel van het draaien van de nummerwielletjes en draai het gehele slot rechtsom. In het geval dat u de code kwijt bent, kunt u de sleutel gebruiken om de code terug te vinden en daarna de kast te openen: zie sectie **code aanpassen**.

Code aanpassen: zie onderhoud en troubleshooting

Belangrijk Het is verplicht om de code en de sleutel altijd beschikbaar te hebben in het geval van een noodoproep (van toepassing op SC1240). Door een defect of verkeerd geprogrammeerde code, kan het gebeuren dat het slot niet opent als de code gebruikt wordt. In dit geval is het noodzakelijk om een alternatief te hebben om de kast te openen (sleutel). Verder is het ook van belang om de bovenstaande procedures te oefenen voordat u de AED opslaat en dit regelmatig te herhalen nadat de AED is geplaatst. Met de sleutel kan de geprogrammeerde code teruggevonden worden (de sleutel kan niet gebruikt worden om de kast direct te openen): zie sectie code aanpassen.



WAARSCHUWING

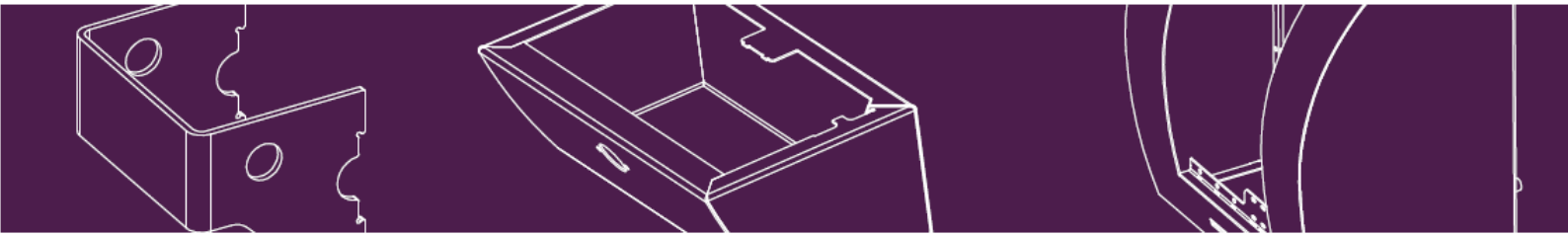

Onderhoud en Troubleshooting

Onderhoud Het is van belang de SmartCase (geldt alleen voor de SC1240) **maandelijks** te openen en sluiten om te verifiëren of het slotsysteem nog correct werkt. Als u dit doet, is het wenselijk ook de status van de AED zorgvuldig te bekijken (raadpleeg daarvoor de handleiding van de AED).



WAARSCHUWING

Het is ook belangrijk om de algehele conditie van de kast te bezien voor eventuele schade die mogelijk de functie van de kast kan beïnvloeden.

Indien er schade wordt geconstateerd, neem dan contact op met uw dealer van de SmartCase. Afhankelijk van de schade kan het aan te raden zijn de AED uit de kast te nemen en de gebruikers te informeren over de status (niet inzetbaar).


Temperatuur in het geval u twijfelt over het functioneren van de elektrische verwarmingselement (en de buitentemperatuur lager is dan 0°C / 32°F), verwijder de AED en neem contact op met uw dealer van de SmartCase. The SC1230/ 1240 zijn uitgerust met actieve ventilatie. Rond de 30°C gaat de fan aan om warme lucht uit te blazen aan de bovenzijde en koele lucht aan te zuigen aan de onderzijde van de kast. Desalniettemin, raden wij aan om de kast in de schaduw te plaatsen om hoge temperature te voorkomen (boven de 50°C).

Code aanpassen (SC1240)

Veiligheids
Advies

1. Bij aflevering is de code van het cijferslot fabrieksmatig gezet op 333.
2. Verander de code uit veiligheidsoverweging onmiddellijk in uw persoonlijke code.
3. **Laat de cijferwielletjes nooit staan op uw persoonlijke code.**
4. De persoonlijke code moet ingevoerd worden om het slot te openen en voor deze te sluiten.
5. Bij een verloren code kan het slot worden geopend met de service sleutel. Neem contact op met de beheerder om het slot te openen en de code aan te passen.

Opening

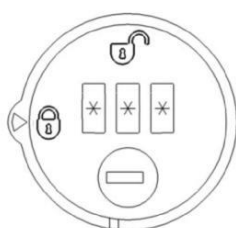


1. Bij ingebruikname eerst de fabriekscade invoeren: 333. Of gebruik uw eigen persoonlijke code (zie punt "Code aanpassen")




2. Draai het slot naar (slot wordt dan geopend)

Code veranderen

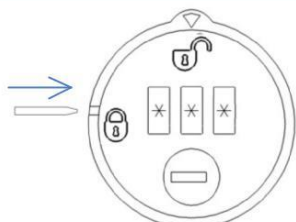


1. In open-positie en met ingevoerde code, druk een kleine pin (bijv. paper clip) in het code setting gaatje aan de kant van het slot. Druk de pin volledig in en hou de druk.

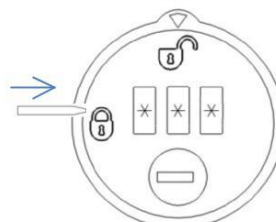


2. Voer een nieuw persoonlijke code in
3. Verwijder de pin (persoonlijke code is veranderd)

Code terugvinden

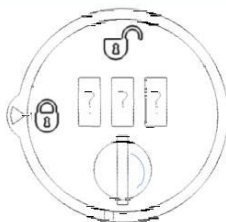

1. Steek de service sleutel in de slotcilinder. Draai de sleutel tegen de klok in

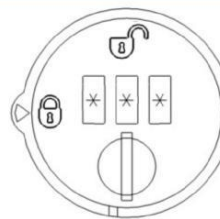


2. Draai de code wielletjes naar boven tot ze blokkeren (code is gevonden)
3. Draai de sleutel terug en verwijder deze

Controleer altijd de aangepaste code door het openen van de SmartCase met de nieuwe code.




WAARSCHUWING

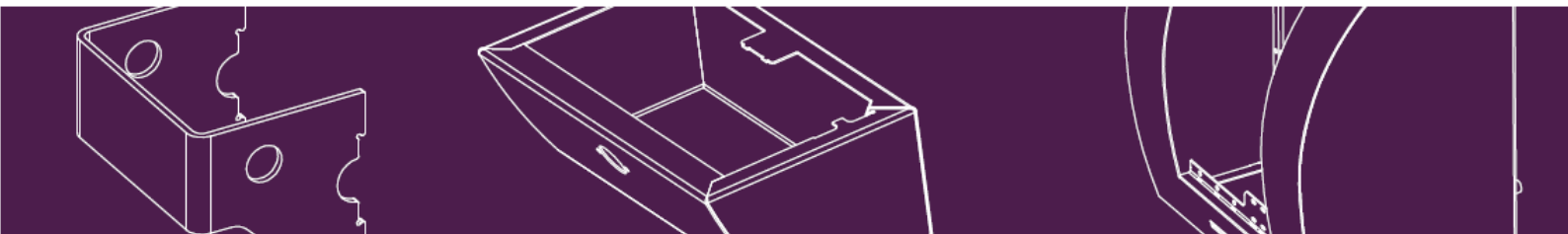

Troubleshooting

Symptoom	Action
LED Verlichting werkt niet of alarm werkt niet	- Controleer de stroomtoevoer en adapter: het LED op de adapter moet continu branden (een knipperend LED of geen LED lichtje duidt op een defect) - Verzekert dat alle connectors goed aangesloten zijn. (inclusief de connectors binnen in de kast) Als de kast blijft disfunctioneren, stel deze buiten gebruik en neem contact op met uw dealer van SmartCase.
Temperatuur (verwarming) in de kast werkt niet goed	De temperatuur wordt geregeld met temperatuursensoren in de kast. De verwarming wordt ingeschakeld als de buitentemperatuur lager is dan 10-15°C en wordt uitgeschakeld als de binnentemperatuur van de kast 20-25°C bereikt. Opmerking: voor een correcte werking van de verwarming moet de deur van de kast gesloten zijn. Als het vermoeden bestaat dat de verwarming niet werkt: - Open de deur. Het alarm moet afgaan. Als het alarm niet werkt, volg dan de stappen: "LED Verlichting werkt niet of alarm werkt niet". - Controleer de functie van het verwarmingselement in de kast door de lade waarop de AED is geplaatst aan te raken (buitentemperatuur moet < 0°C zijn). De lade moet warmer aanvoelen dan de buitentemperatuur. Als dit niet het geval is: neem de kast uit gebruik, verwijder de AED en neem contact op met de dealer van Smart case. Verwarming is continu aan: - verwijder de AED. - Controleer of de deur van de kast goed gesloten is. Als de deur open is, sluit de deur dan. Wacht 5 minuten en controleer of de verwarming is uitgeschakeld. - Als het apparaat blijft uitvallen, verwijder dan de AED, stel hem buiten gebruik, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de SmartCase-dealer.
Slot gaat niet open als de geprogrammeerde code wordt gebruikt	- Programmeer de code opnieuw volgens deze handleiding - Probeer de kast te sluiten en openen met de nieuwe code Als het slot nog steeds niet functioneert, neem contact op met uw dealer van SmartCase.
Kast gaat niet goed dicht	- Controleer of iets de deur blokkeert. - Controleer of het slot of de deur is vervormd in de buurt van het slotmechanisme Als de kast niet gerepareerd kan worden, stel deze buiten gebruik en neem contact op met uw dealer van SmartCase.

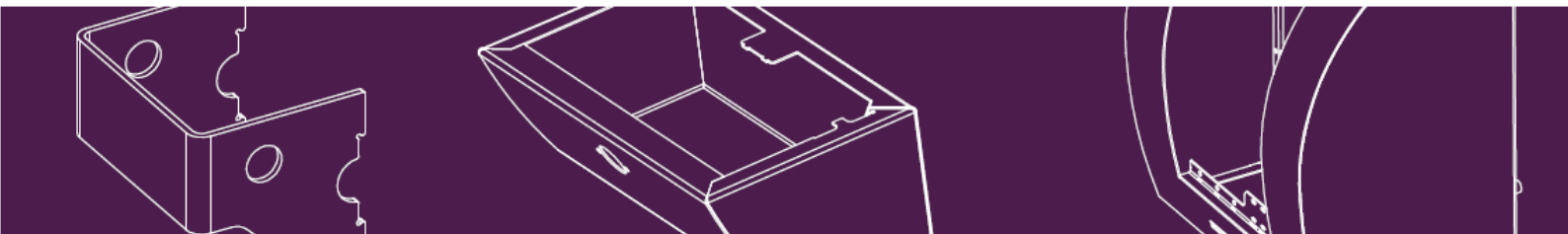

Begrippenlijst

AED

De AED (Automatic External Defibrillator) is een belangrijk apparaat voor primaire hulp in het geval van hartfalen. Het is van groot belang dat de AED beschermd is, beveiligd is en 24/7 beschikbaar is voor onmiddellijke ondersteuning in een noodgeval.

Operator/ gebruiker

De person die verantwoordelijk is voor de kast en AED. Zijn / haar plicht is om de status van de AED en de kast te controleren en te verzekeren dat de kast wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in deze handleiding.

Online service

Voor meer informatie of online hulp, bezoek onze website www.sixcase.com.

Gebruikershandleiding: De handleiding bevat alle noodzakelijke informatie over het gebruik van de SmartCase. Updates worden op onze website gepubliceerd.


Disclaimer: GT MEDICARE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inzetbaarheid van de AED die is opgeslagen in de SmartCase kast. GT MEDICARE is niet verantwoordelijk voor de installatie, gebruik of inzet van de kast/AED, alsmede niet voor het verlies van data, inkomen, direct of indirect alsmede niet voor veroorzaakte schade aan derden. Uitzonderlijke omstandigheden, zoals lage temperature, defecte onderdelen of andere externe factoren kunnen resulteren in het niet inzetbaar zijn van de AED's. GT MEDICARE behoudt zich het recht voor om dit document en alle gerelateerde produkten uit deze handleiding aan te passen of te verbeteren, zonder in kennisstelling vooraf.

Contact

GT Medicare BV
Industrieweg 36A
2382 NW Zoeterwoude
The Netherlands
T +031 (0) 71 2100 229
E info@sixcase.com



WAARSCHUWING

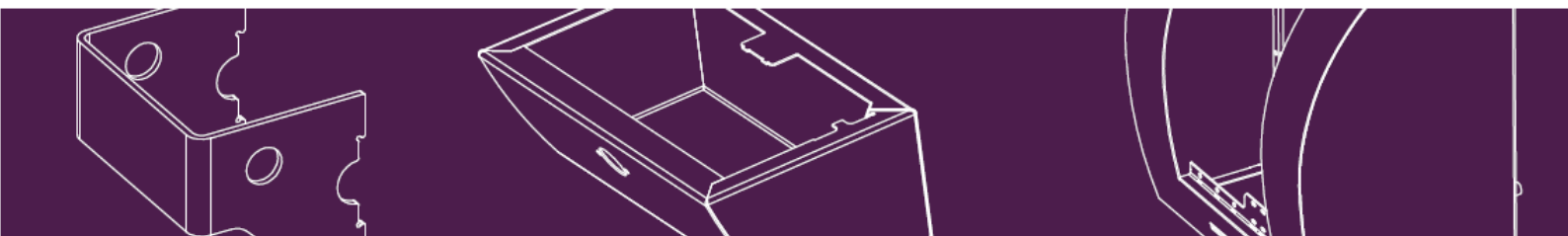

Appendix A: Technische specificatie

Technische Specificatie

Type	SC1230 / SC1240
Gewicht	6 kg
Afmetingen	40(h)x40(w)x20(d)cm
Schokbestendig	IEC61439-5 clause 10.2.101.2/3
Waterdicht	IP54
Koeling	Actieve ventilatie
Verwarming	Electrisch tot -20 °C buitentemperatuur
Corrosie bestendig	Roestvast staal met coating
Venster	Impact bestendig polycarbonaat
Installatie kit	Bijgesloten (hout & steen)
Stroomvoorziening	24V Transformator (bijgesloten)
Opening	SC1230: Deurknop SC1240: Mechanisch 3 cijferig slot (onafhankelijk van stroomvoorziening)
Verlichting	LED rood en blauw
Akoestisch alarm	+/- 95dB intermittent